



Máscaras de Protección Facial modelo "COVID-19 Taskforce"

Esta máscara de protección facial ha sido desarrollada durante la pandemia del COVID-19. La aprobación para su uso como elemento de protección personal depende exclusivamente de los reglamentos de la institución a la que pertenece el usuario.

Utilizar de manera incorrecta el producto puede resultar dañino para el usuario. Lea detenidamente este manual antes de su utilización.

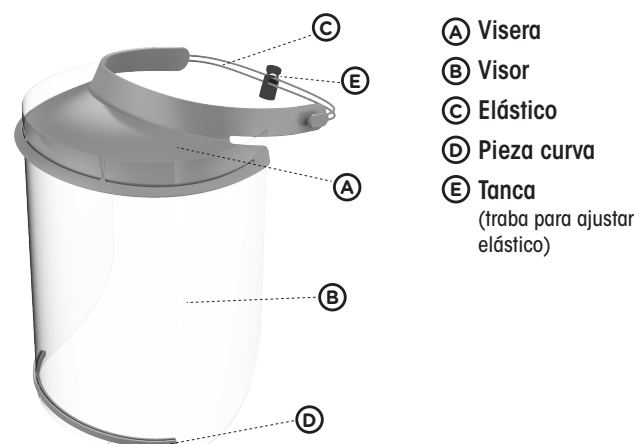

Ensamblado

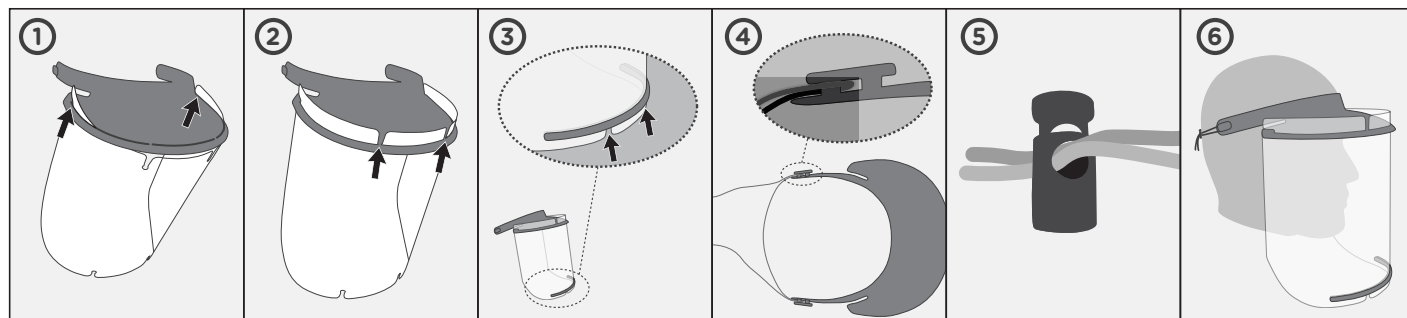

- 1 Insertar el visor (B) en los extremos de la ranura frontal de la visera (A).
- 2 Encastrar las perforaciones centrales del visor en el centro de la visera.
- 3 Insertar la pieza curva (D) en la parte inferior del visor (B).
- 4 Sujetar el elástico (C) por los pasadores de los extremos de la visera.
- 5 Unir los extremos del elástico enhebrándolos en la tanca (E).
- 6 Ajustar el elástico con la tanca para que la máscara quede firmemente colocada.

- i** Para retirar el visor, primero presione levemente su parte frontal y luego los extremos.




PRESTACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO:

- Esta máscara de protección facial está diseñada para ser utilizada con otros equipos de protección personal como barbijo, antiparras u otros. Estos equipos en conjunto se utilizan para proteger boca, nariz y ojos, ayudando a prevenir la exposición personal a salpicaduras de fluidos corporales o la aspiración de micropartículas suspendidas en el aire.
- El solo uso de este producto no garantiza la detención de infecciones y debe combinarse con otras medidas de protección personal.
- El protector facial es de uso personal, no lo utilice si le perteneciera a otro trabajador.
- Si el protector se daña durante su uso, abandone el área crítica inmediatamente y reemplácelo.
- Para el correcto uso de esta máscara de protección facial, siga siempre el procedimiento de la institución a la que pertenece.

Colocación

- 1 Tomar la máscara por los laterales de la visera.
- 2 Posicionar en la cabeza desde arriba, desde atrás hacia adelante. La visera debe quedar a la altura de la frente.
- 3 Ajustar el elástico a la visera de manera tal que la misma quede completamente fija.
- 4 Comprobar que la pantalla cubra perfectamente toda la circunferencia de la cara.
- 5 La extracción de la máscara debe hacerse en áreas no expuestas a agentes contaminantes o infecciosos.

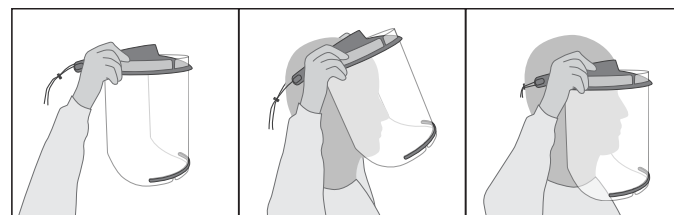

Fuente:
https://covid.ingenieria.uner.edu.ar/pluginfile.php/6720/mod_label/intro/Manual%20del%20usuario%20mascara%20iny.pdf

Recambio

Recomendamos el recambio del visor cuando esté rayado, no trabee correctamente con la visera o dificulte la visibilidad. El diseño de Miles de Máscaras contempla la posibilidad de reemplazar el visor por una nueva placa de PET, acetato, radiografía o material similar. Puede utilizar el visor provisto como molde para realizar el corte o descargar el plano del visor en: milesdemascaras.org/mascara-de-proteccion-facial-detalles. Las perforaciones de encastre fueron pensadas para ser realizadas con una agujereadora de papel convencional.

Desinfección

Se recomienda desinfectar antes de su primer uso. Para la correcta desinfección de esta máscara de protección facial, siga el procedimiento de la institución a la que pertenece. Cada establecimiento determina un procedimiento en base a la función del personal que utiliza la máscara, la cantidad de insumos y el lugar de lavado.

En caso de no contar con un procedimiento específico de desinfección de máscaras, desde Miles de Máscaras, recomendamos:

- 1 Desarmar la máscara de protección facial.
- 2 Rociar con una solución de alcohol (70% alcohol, 30% agua).
- 3 Dejar reposar durante 10 minutos para que el producto logre una desinfección exitosa.
- 4 Lavar todas las piezas de la máscara con agua y jabón.
- 5 Dejar secar las piezas de la máscara sobre una superficie limpia.



Consulte las instrucciones del informe "COVID-19 Limpieza y desinfección. Material sanitario, superficies y ambientes (Ministerio de Salud Argentina)".

Las máscaras de protección facial de la organización sin fines de lucro Miles de Máscaras son fabricadas por Teclastar S.A. (Av. Pres. Arturo Illia 2064, Villa Maipú, San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina).

Este manual se realizó bajo las recomendaciones del Informe Técnico de Evaluación de Producto elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para Miles de Máscaras.

Sitio web: www.milesdemascaras.org
 Teléfono: +549 1167945965
 Mail: milesdemascaras@gmail.com